

取扱説明書

S06HG-001BK

Relax & Refresh

HANDY GUN



取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後も、取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

- 本製品は身体用の電動振動機です。取扱説明書をよくお読みになり、本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使ください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 警 告

- ご使用前に必ず付属の取扱説明書をよくお読みください。
- 下記の方は必ず医師と相談のうえ、使用を判断してください。
 - ・急性疾患のある方 ・悪性腫瘍のある方 ・妊娠中の方
 - ・アレルギー体質で敏感肌の方 ・皮フ炎、過度の日焼けなど、皮フに異常のある方
 - ・肌に傷や湿疹、はれものなどがある方
- 本製品のご使用中、またはご使用後に、万一異常と思われる痛み等があった場合、あるいは不快感を感じた場合は、ただちにご使用を中止し、医師に相談してください。
- 本製品は約15分で自動停止する機能が備わっています。同じ箇所に30秒以上連続で使用しないでください。

⚠ 注 意

- 疲労が激しい時や、お酒に酔っている時、皮フに異常がある場合は使用しないでください。
- 素肌では使用しないでください。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。故障、破損の原因となります。
- アクセサリーなどをつけたまま使用しないでください。
- 本製品は防水加工が施されておりません。濡れた身体には使用しないでください。
- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- 誤使用の危険がありますので、小さなお子様の手の届かない場所で使用、保管してください。
- ストーブなど火の気のある場所では使用しないでください。
- 浴室など湿度の高い場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿となる場所での保管は避けてください。
- 充電には付属の専用充電ケーブルを使用してください。
- 安全のため、破損、劣化した商品のご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称


- 本体×1
- 付替用ヘッド×4
- 専用充電ケーブル×1
- 保証書付取扱説明書(本紙)×1



ヘッド取付口

ハンドル

〈本体〉

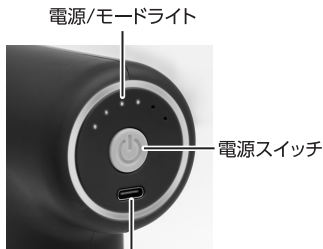

電源/モードライト

電源スイッチ

充電ジャック



〈付替用ヘッド〉



〈専用充電ケーブル〉



〈保証書付取扱説明書(本紙)〉

充電方法

※充電を開始する前に、本体の充電ジャックおよび充電ケーブルに、水分やほこりなどが付着していないことを確認してください。

※本体や充電ケーブルに水がかかるおそれがある場所では充電しないでください。

※充電中は使用しないでください。



本体の充電ジャックへ



AC/DCアダプターなどの
しっかりと電源を供給できるUSBポートへ

1. 付属の専用充電ケーブルを図のように本体の充電ジャックと、しっかりと電源を供給できるUSBポートへ接続します。
2. 充電中は電源/モードライトが点灯し、充電が完了するとすべてのライトが点灯します。
※充電時間は約2時間です。過充電にご注意ください。
3. フル充電で約120分の使用が可能です。
※充電時間、使用時間は目安です。ご使用になる環境によって異なります。

使用方法

- 1.本体に付属のヘッドを取り付けます。
- 2.本体充電後、電源ボタンを長押しすると電源が入り、高速振動を開始します。
2.電源ボタンで振動強度を6段階まで調節することができます。
※電源ボタンを押すごとに振動強度と電源ランプの点灯箇所が変化します。
- 3.肌にやさしく触れるくらいの強さで、肩や背中、腰など、気になるところに軽く当てます。
※同じ箇所に30秒以上連続で使用しないでください。
※強く当てると高速振動します。ご注意ください。
※振動が停止するくらい強く当てることはおやめください。
※約15分で自動停止する機能が備わっています。
※本製品の使用中や使用後に、万が一、肌トラブルや違和感、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を止め、医師に相談してください。
- 4.使用後は電源ボタンを長押しすると停止します。
- 5.「お手入れ方法」を参照し、保管してください。

※充電残量が少なくなると、モードランプの点灯が不安定になり、振動が弱くなります。

お手入れ方法

- 1.本体をぬれ布巾などでよく拭いた後、乾いた布巾やティッシュなどで十分乾拭きしてください。
 - 2.風通しの良い場所で保管してください。
- ※お手入れに、シンナーやベンジン、漂白剤などは使用しないでください。

製品仕様

製品仕様

本体サイズ	約H140×W115×D50mm
本体重量	約365g
電源	USB充電式
充電時間	約3時間 ※充電環境によって異なります

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。